

DIN 13193**DIN**

ICS 11.040.30

Ersatz für
DIN 13193:1983-02**Medizinische Instrumente –
Hohlmeißelzangen nach Luer**Medical instruments –
Rongeurs type LuerInstruments médicaux –
Pince-gouge de Luer

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ erarbeitet.

Die DIN-Normenreihe „Medizinische Instrumente“ wird im Hinblick auf die Übernahme der VG-Normen in das DIN-Normenwerk komplett überarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 13193:1983-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) aufgenommen bzw. ergänzt wurden die Abschnitte Anwendungsbereich, Allgemeines, Kennzeichnung und Verpackung;
- b) das Maß für das Maulteil in Form B wurde in $10,5 \pm 1$ mm geändert;
- c) die Formen G und H aus VG 13193:1990-12 wurden zusätzlich aufgenommen;
- d) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 13193: 1973-11, 1983-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen für medizinische Instrumente fest, wie sie in der Chirurgie, im Gesundheitswesen oder innerhalb der Bundeswehr verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 58298:2005-12, *Medizinische Instrumente – Werkstoffe, Ausführung und Prüfung*

DIN 58300, *Schlussarten für chirurgische Instrumente*

VG 96042, *Medizinische Instrumente – Verpackung – Technische Spezifikation*

3 Allgemeines


Zur eindeutigen Festlegung und zur Sicherstellung logistischer Forderungen der Bundeswehr wurden weitere Maße und Angaben aufgenommen (siehe Kennzeichnung und Verpackung).

4 Maße und Bezeichnung

4.1 Maße

Form A

Maße in Millimeter

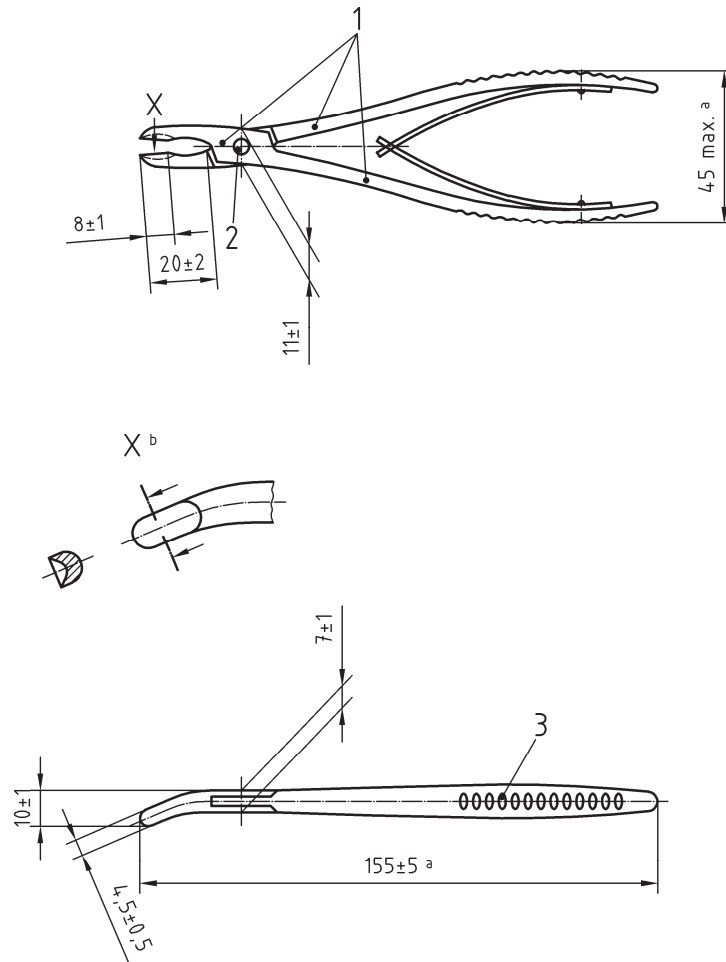

Legende

- 1 Platz für Kennzeichnung
- 2 Durchsteckschluss DIN 58300 – D 20
- 3 Oberflächenprofil der Griffflächen nach Wahl des Herstellers

a bei geschlossener Zange

a vergrößert

ANMERKUNG Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

**Bild 1 — Hohlmeißelzangen nach Luer
Form A**